

1 Przeznaczenie

HHM-1100H jest ręcznym urządzeniem masującym, które dzięki wibracji i ogrzewaniu, łagodzi napięcia i bóle mięśni oraz pomaga w osiągnięciu rozluźnienia. Może być używane do stymulowania zakończeń nerwowych i krążenia krwi. Znakomity sposób na pozbycie się stresu.

2 Porady dotyczące bezpieczeństwa

Urządzenie jest przeznaczone tylko do zastosowań opisanych w niniejszym podręczniku użytkownika. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zranienia lub uszkodzenia spowodowane niezgodnym z przeznaczeniem lub nieostrożnym użytkowaniem.

2.1 Informacje ogólne

- Dokładnie przeczytać instrukcje bezpieczeństwa i zachować niniejszy podręcznik użytkownika do późniejszego wglądu.
- Podczas używania należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa dla urządzeń elektronicznych.
- To nie jest zabawka. Nie pozwalać dziecku na zabawę nim.
- Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku prywatnego. Nie jest przeznaczone do zastosowań medycznych lub komercyjnych. W przypadku jakichkolwiek obaw o własne zdrowie skonsultować się z lekarzem przed użyciem urządzenia.
- Urządzenie nie jest wodoodporne. Nie wolno wystawiać go na deszcz ani wilgoć.
- Nie pozostawiać nie pilnowanego urządzenia pod napięciem. Odłączyć je od źródła zasilania natychmiast po użyciu.
- Upewnić się czy urządzenie nie znajduje się zbyt blisko źródeł ciepła takich jak piekarniki, grzejniki lub bezpośrednie światło słoneczne.

2.2 Porażenie prądem elektrycznym

- Nie używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką.
- Nie używać urządzenia, jeśli nie działa prawidłowo, spadło lub zostało uszkodzone.
- Naprawy urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowane osoby. Niewłaściwa naprawa może stwarzać znaczne zagrożenie dla użytkownika. W celu naprawy urządzenia skontaktować się z serwisem lub autoryzowanym przedstawicielem.
- Nie wolno rozmontowywać urządzenia. Nie zawiera ono części, które mogłyby być naprawiane przez użytkownika.
- Nie zrzucać ani nie wkładać obiektów do żadnych otworów.
- Urządzenia nie należy umieszczać w wilgotnym pomieszczeniu ani w odległości mniejszej niż 1,5 m od źródła wody.
- Nie używać urządzenia jednorazowo dłużej niż 15 minut. Nadmierne użytkowanie może doprowadzić do przegrzania urządzenia i skrócenia jego żywotności.
- Nie wolno rozmontowywać urządzenia. Nie zawiera ono części, które mogłyby być naprawiane przez użytkownika.
- Nigdy nie używać urządzenia podczas burzy.
- Nie używać urządzenia masującego znajdującego się pod kocem lub poduszką. Nadmiar ciepła może doprowadzić do pożaru, śmiertelnego porażenia prądem lub zranienia.
- Nie wyjmować wtyczki z gniazda zasilania, gdy urządzenie masujące pracuje.


- Jeżeli kabel zasilający ulegnie uszkodzeniu, wówczas musi on zostać wymieniony przez producenta, sprzedawcę, jego centrum serwisowe lub wykwalifikowany personel, aby uniknąć zagrożenia.

2.3 Uwagi wstępna dla urządzenia masującego

- Urządzenie to nie jest przeznaczone do stosowania przez osoby (w tym dzieci) niepełnosprawne umysłowo, ruchowo lub fizycznie oraz przez osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy na temat jego użytkowania. Dla bezpieczeństwa takich osób konieczny jest odpowiedni nadzór oraz podanie jasnych wskazówek dotyczących użytkowania.
- Nie wolno używać urządzenia masującego:
 - Dzieciom poniżej 16-tego roku życia.
 - Osobom cierpiącym na przepuklinę lub z nieprawidłowymi zmianami kręgow kręgosłupa.
 - Nie w przypadku chorób układu krążenia i bólu głowy.
 - Nie w przypadku opuchnięcia, poparzeń, zapalenia, otwartych ran, świeżych ran, chorób hematologicznych, krwawienia lub innych ran pleców lub nóg.
 - W czasie ciąży.
 - W łóżku lub w czasie spania.
 - Po spożyciu leków lub alkoholu (obniżony poziom świadomości).
 - Osobom z wrażliwą skórą lub z niskim krążeniem krwi.
 - W samochodzie
 - W czasie obsługi maszyn.
 - W przypadku wszczepionego rozrusznika serca, implantu lub innych.
 - W przypadku poniższych dolegliwości: Przeziębienie z gorączką, żyłaki, tworzenie się skrzepów, zapalenia żył, żółtaczk, cukrzyca, choroby układu nerwowego (np. rwa kulszowa), gruźlica, nowotwór, hemoroidy, obtłuczenia lub ostre zapalenie.
 - Nie w przypadku bólu nieokreślonego organu.
 - Do masowania głowy.
- Ścisły nadzór jest wymagany w przypadku, gdy urządzenie jest używane przez lub w pobliżu osób niepełnosprawnych.
- Osoby z rozrusznikiem serca powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem.
- Nie używać tego urządzenia przed spaniem. Masaż działa stymulująco i może opóźnić zaśnięcie.
- Gdy urządzenie pracuje, nie wkładać rąk pomiędzy głowicę masującą o ciało.
- Należy wywierać na urządzenie tylko łagodną siłę, aby wyeliminować ryzyko zranienia.
- Jeśli materiał, pokrywający mechanizm masujący zaczyna się niszczyć lub rozwarstwiać, zaprzestać użytkowania.
- Nigdy nie wkładać żadnych części ciała (palców lub rąk) do wnętrza urządzenia.
- Skonsultować się z lekarzem w przypadku jakichkolwiek wątpliwości terapeutycznych, związanych z użytkowaniem urządzenia masującego.
- Masaż powinien być przyjemny i komfortowy. Jeżeli wystąpią bóle lub niewygod, zaprzestać użytkowania i skonsultować się z lekarzem.
- Nie zasypiać w czasie użytkowania urządzenia masującego.

3 Opis przycisków

1. Głowica masująca z ogrzewającą lampą podczerwieni
2. Przełącznik ON/OFF
3. Przewód zasilania

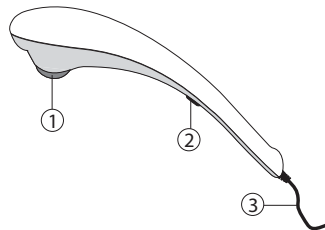


4 Rozpoczęcie pracy

4.1 Ważne

- Skonsultować się z doświadczoną osobą opieki zdrowotnej z odpowiednimi uprawnieniami. Ona lub on doradzi, czy użytkowanie urządzenia masującego jest bezpieczne. Co należy zrobić i czy są jeszcze inne czynności jakie należy zrobić, aby pomóc.
- Nie używać bezpośrednio na skórze. Użyć odzieży lub szmatki, aby ochronić skórę i zapewnić higienę.
- Nie masować konkretnej części ciała częściej niż co drugi dzień.

4.2 Używanie urządzenia masującego

- Podłączyć przewód zasilający do gniazdka zasilania o napięciu AC 220V-240V, 50-60 Hz. **Gniazdko zasilania powinno być umieszczone blisko i łatwo dostępne.**
- Przesunąć przełącznik ON/OFF w położenie B, aby włączyć silne wibracje.
- Przesunąć przełącznik ON/OFF w położenie C, aby włączyć delikatne wibracje.
- W położeniu A urządzenie jest wyłączone.

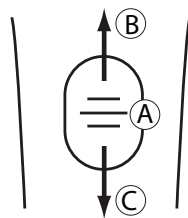


Ogrzewanie promieniami podczerwonymi będzie włączone razem z wibracjami. Ogrzewana powierzchnia urządzenia masującego potrzebuje kilku minut na podgrzanie.

4.3 Jaki i co masować

- Zaleca się masowanie napiętych i sztywnych obszarów mięśni z regulatorem prędkości w położeniu niskim. Na początku naciskać z niewielką siłą
- Trzymać urządzenie masujące nieruchomo w jednym miejscu przez około 30 sekund, po czym przesunąć je do następnego miejsca wymagającego masowania.

1. Szyja
2. Plecy
3. Talia
4. Dłoń
5. Stopa
6. Łydka
7. Udo
8. Ramię
9. Szyja i bark

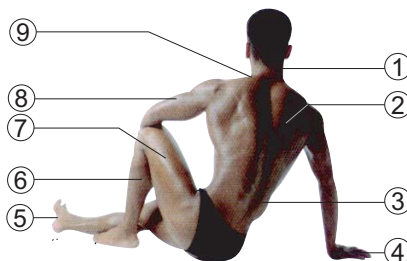

- Bardzo ważne jest, aby masowana część ciała była rozluźniona. W czasie trzymania urządzenia masującego, ramię je trzymające będzie naprężone. Dlatego należy przełożyć urządzenie masujące do drugiej ręki.
- Nigdy nie naciskać zbyt mocno.

- Zawsze kończyć delikatnym masażem z małą siłą nacisku.

5 Dane techniczne

Wymiary (S/W/G)	380 x 100 x 80 mm
Waga	1Kg
Napięcie znamionowe	AC 220V-240V, 50-60 Hz
Moc znamionowa	25W

6 Czyszczenie

- Odłączyć urządzenie i odczekać aż ostygnie.
- Wyczyścić miękką ściereczką lub lekko wilgotną gąbką.
- Nie dopuścić, aby woda lub inna ciecz dostała się do urządzenia lub akcesoriów.
- Nie używać do czyszczenia ściernych substancji czyszczących, szczotek, benzyny, nafty oraz substancji do polerowania szkła lub powierzchni lakierowanych.

7 Usuwanie urządzenia (środowisko)



Pod koniec okresu eksploatacji produktu, nie należy go wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale zanieść do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wskazuje na to symbol umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi i/lub opakowaniu.

Niektóre materiały wchodzące w skład niniejszego produktu można ponownie wykorzystać, jeżeli zostaną dostarczone do punktu zbiórki w celu recyklingu. Dzięki ponownemu wykorzystaniu niektórych części lub surowców ze zużytych produktów, przyczyniają się Państwo w istotny sposób do ochrony środowiska.

Aby uzyskać informacje na temat lokalnych punktów zbiórki, należy zwrócić się do władz lokalnych.

8 Gwarancja Topcom

8.1 Okres gwarancji

Urządzenia Topcom są objęte 24-miesięcznym okresem gwarancji. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu nowego urządzenia.

Części eksploatacyjne lub wady nieznacznie wpływające na działanie lub wartość sprzętu nie są objęte gwarancją.

Gwarancję należy udowodnić, przedstawiając rachunek zakupu oryginał lub kopia, na którym widnieje data zakupu oraz model urządzenia.

8.2 Obsługa gwarancji

Wadliwe urządzenie należy zwrócić do zakładu serwisowego Topcom wraz z ważnym rachunkiem zakupu oraz wypełnioną kartą serwisową.

Jeżeli w urządzeniu wystąpi usterka w trakcie trwania okresu gwarancji, firma Topcom lub jej autoryzowany zakład serwisowy bezpłatnie usunie powstałą usterkę spowodowaną wadą materiałową lub produkcyjną, przez naprawę lub wymianę urządzenia lub jego części. W przypadku wymiany, kolor i model urządzenia mogą różnić się od urządzenia pierwotnie zakupionego.

Data pierwotnego zakupu będzie określać początek okresu gwarancyjnego. Okres gwarancyjny nie ulega przedłużeniu, jeżeli urządzenie zostało wymienione lub naprawione przez Topcom lub autoryzowany zakład serwisowy.

8.3 Wyjątki od gwarancji

Uszkodzenia lub wady spowodowane nieprawidłowym obchodzeniem się lub pracą z urządzeniem oraz uszkodzenia powstałe w wyniku zastosowania nieoryginalnych części lub akcesoriów nie są objęte gwarancją.

Gwarancja nie obejmuje szkód wywołanych przez czynniki zewnętrzne, takich jak pioruny, woda i ogień, ani uszkodzeń powstałych w czasie transportu. Gwarancja nie ma zastosowania, jeżeli numer seryjny urządzenia został zmieniony, usunięty lub nie może zostać odczytany.

Wszelkie roszczenia gwarancyjne zostaną uznane za nieważne, jeśli urządzenie było naprawiane, zmieniane lub modyfikowane przez użytkownika.



Symbol CE oznacza, ten produkt spełnia podstawowe wymogi i postanowienia dyrektywy 2004/108/EEC.

Deklarację zgodności można znaleźć w:

<http://www.topcom.net/cedclarations.asp>